

Conjunto de Nebulização



Uso em
OXIGÊNIO HOSPITALAR
ou NEBULIZADOR DOMÉSTICO



Uso em
AR COMPRIMIDO



A *Daru* tem a solução ideal para o paciente nebulizar com conforto e segurança que merece.

Os conjuntos de nebulização fabricados pela *Daru* proporcionam maior volume de névoa e menor tamanho da partícula (o que faz com que se atinja os alvéolos mais rapidamente).



- Disponível nas versões adulto ou infantil, com opção para aplicação em saída de Oxigênio Hospitalar/ nebulizador doméstico ou em saída de Ar Comprimido.
Com mangueiras/extensões de 1,60m e 2,80m.
- As peças são inquebráveis.
- O sistema de rosqueamento é perfeito.

O Conjunto de Nebulização é um produto de uso INDIVIDUAL, não estéril.



COMPONENTES:

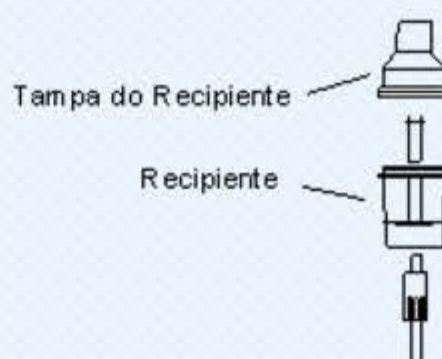
- Máscaras: PVC médico-hospitalar SEM DEHP
- Copinho: Polipropileno
- Mangueira: PVC
- Terminal da Mangueira: PVC
- Conector verde para Oxigênio: Poliestireno
- Conector amarelo para Ar Comprimido: Poliestireno

Instruções para o correto funcionamento do Conjunto de Nebulização no aparelho NEBULAR PLUS:



Chave seletora
de voltagem

Verifique se a voltagem do aparelho está correta



Tampa do Recipiente

Recipiente

Após retirar a tampa do recipiente para colocar a solução indicada pelo médico, observe se o inserto está totalmente assentado no fundo da base do copinho. Em seguida, tampe o recipiente.



Observe se conectou **CORRETAMENTE** a extensão no recipiente, **GIRANDO** o Terminal de encaixe. Desta forma será evitado que as partes se soltem impedindo o funcionamento do conjunto de nebulização.

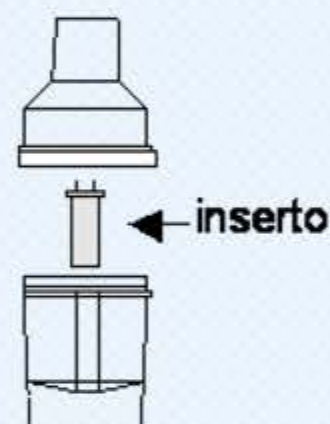


Conecte a extensão na saída de ar. Encaixe com **CUIDADO** a extensão na saída de ar e **ROSQUEIE** corretamente **ATÉ O FINAL** para evitar vazamento de ar.

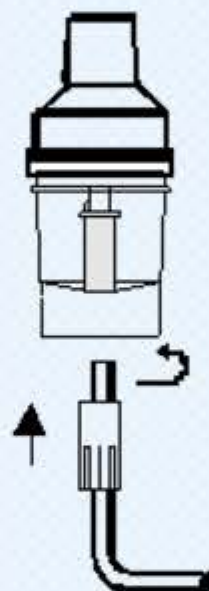


Ligue o aparelho. Aplique o nebulizador e respire normalmente. A duração do tratamento e o medicamento dependerão da orientação do seu médico.

Para correto funcionamento em saídas de Oxigênio Hospitalar ou Ar Comprimido (a ser manipulado por PROFISSIONAL DA SAÚDE):



Após retirar a tampa do recipiente para colocar a solução indicada pelo médico, o **PROFISSIONAL DA SAÚDE** deve observar se o inserto está totalmente assentado no fundo da base do copinho. Em seguida, deve tampar o recipiente.



O **PROFISSIONAL DA SAÚDE** deve observar se conectou **CORRETAMENTE** a extensão no recipiente, **GIRANDO** o Terminal de encaixe. Desta forma será evitado que as partes se soltem impedindo o funcionamento do conjunto de nebulização. Para conectar a extensão na saída de ar, deve encaixar com **CUIDADO** a extensão na saída de ar e **ROSQUEAR** corretamente **ATÉ O FINAL** para evitar vazamento de ar.

Regule lentamente o controlador de vazão até obter a névoa desejada, nunca ultrapassando 8,0 l/min.







PRESSÃO MÁXIMA DE UTILIZAÇÃO RECOMENDADA: 7,0 bar (100 psi)

Instruções para **DESINFECÇÃO E LIMPEZA**:

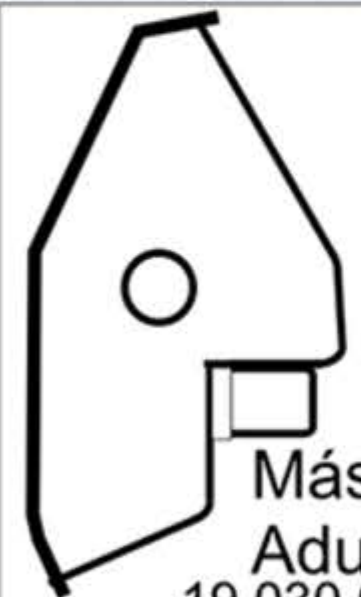

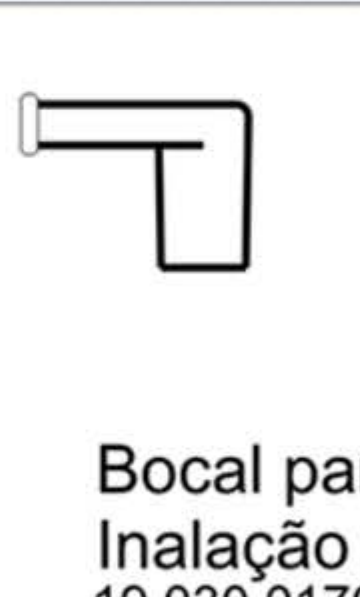
- 1) Separe as peças e lave-as com água corrente e detergente líquido neutro **COM EXCEÇÃO** da mangueira (extensão).
- 2) Utilize a solução germicida encontrada em farmácias e casas especializadas seguindo as instruções do fabricante desta solução.
OU coloque 1 colher de sopa de água sanitária em 1 litro de água filtrada. Mergulhe os componentes nesta solução por 30 min.
- 3) Enxágue em água corrente e deixe **SECAR BEM** todos os componentes.
 - Após cada uso repita todos os procedimentos acima.
 - **NUNCA** coloque qualquer peça em água fervendo OU em microondas OU em qualquer tipo de desinfecção térmica.

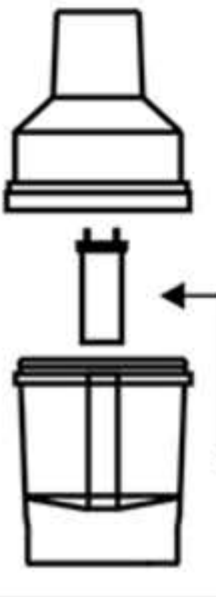
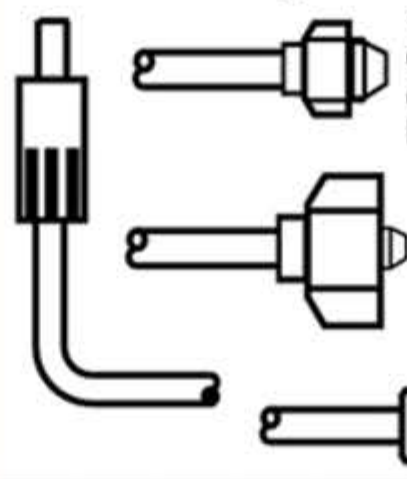
Conjunto de Nebulização

Conjunto de Nebulização

<div><div>Encaixe em Saída de Oxigênio Hospitalar ou p/ Nebulizador Doméstico ADULTO</div><div>Contém: Conector Verde 9/16" (18UNF) Máscara Adulto Copinho (micronebulizador) Extensão (mangueira)</div><div><p>Pressão máxima de utilização recomendada: 7,0 bar (100 psi) *</p><p>O inserto deve estar totalmente assentado no fundo da base do copinho.</p><p>Conecte CORRETAMENTE todas as partes para evitar que as mesmas se soltem impedindo o funcionamento do conjunto de nebulização.</p><p>Uso em oxigênio hospitalar ou nebulizadores com saída de ROSCA</p><p>Extensão (mangueira) 1,60m 19.030.0090-8</p><p>Extensão (mangueira) 2,80m 19.030.0350-8</p><p>Reg ANVISA 10293210016</p></div></div>	<div><div>Encaixe em Saída de Oxigênio Hospitalar ou p/ Nebulizador Doméstico INFANTIL</div><div>Contém: Conector Verde 9/16" (18UNF) Máscara Infantil Copinho (micronebulizador) Extensão (mangueira)</div><div><p>Pressão máxima de utilização recomendada: 7,0 bar (100 psi) *</p><p>O inserto deve estar totalmente assentado no fundo da base do copinho.</p><p>Conecte CORRETAMENTE todas as partes para evitar que as mesmas se soltem impedindo o funcionamento do conjunto de nebulização.</p><p>Uso em oxigênio hospitalar ou nebulizadores com saída de ROSCA</p><p>Extensão (mangueira) 1,60m 19.030.0100-7</p><p>Extensão (mangueira) 2,80m 19.030.0360-0</p><p>Reg ANVISA 10293210016</p></div></div>	<div><div>Encaixe em Saída de Ar Comprimido ADULTO</div><div>Contém: Conector Amarelo 3/4" (16UNF) Máscara Adulto Copinho (micronebulizador) Extensão (mangueira)</div><div><p>Pressão máxima de utilização recomendada: 7,0 bar (100 psi) *</p><p>O inserto deve estar totalmente assentado no fundo da base do copinho.</p><p>Conecte CORRETAMENTE todas as partes para evitar que as mesmas se soltem impedindo o funcionamento do conjunto de nebulização.</p><p>Uso em ar comprimido hospitalar</p><p>Extensão (mangueira) 1,60m 19.030.0310-7</p><p>Extensão (mangueira) 2,80m 19.030.0370-3</p><p>Reg ANVISA 10293210017</p></div></div>	<div><div>Encaixe em Saída de Ar Comprimido INFANTIL</div><div>Contém: Conector Amarelo 3/4" (16UNF) Máscara Infantil Copinho (micronebulizador) Extensão (mangueira)</div><div><p>Pressão máxima de utilização recomendada: 7,0 bar (100 psi) *</p><p>O inserto deve estar totalmente assentado no fundo da base do copinho.</p><p>Conecte CORRETAMENTE todas as partes para evitar que as mesmas se soltem impedindo o funcionamento do conjunto de nebulização.</p><p>Uso em ar comprimido hospitalar</p><p>Extensão (mangueira) 1,60m 19.030.0320-0</p><p>Extensão (mangueira) 2,80m 19.030.0380-6</p><p>Reg ANVISA 10293210017</p></div></div>	<div><div>Nebulizador encaixe** ADULTO</div><div>Contém: Máscara Adulto Copinho (micronebulizador) Extensão (mangueira)</div><div><p>Leia instruções no Manual do Usuário do nebulizador</p><p>O inserto deve estar totalmente assentado no fundo da base do copinho.</p><p>Conecte CORRETAMENTE todas as partes para evitar que as mesmas se soltem impedindo o funcionamento do conjunto de nebulização.</p><p>** Nebulizadores de ENCAIXE (p/ reposição em modelos com fabricação anterior a dez/2013)</p><p>Extensão (mangueira) 1,60m 19.030.0120-2</p><p>Extensão (mangueira) 2,80m 19.030.0340-5</p><p>Reg ANVISA 10293210004</p></div></div>	<div><div>Nebulizador encaixe** INFANTIL</div><div>Contém: Máscara Infantil Copinho (micronebulizador) Extensão (mangueira)</div><div><p>Leia instruções no Manual do Usuário do nebulizador</p><p>O inserto deve estar totalmente assentado no fundo da base do copinho.</p><p>Conecte CORRETAMENTE todas as partes para evitar que as mesmas se soltem impedindo o funcionamento do conjunto de nebulização.</p><p>** Nebulizadores de ENCAIXE (p/ reposição em modelos com fabricação anterior a dez/2013)</p><p>Extensão (mangueira) 1,60m 19.030.0130-5</p><p>Extensão (mangueira) 2,80m 19.030.0330-2</p><p>Reg ANVISA 10293210004</p></div></div>
--	---	---	--	--	--

Peças Individuais:

<div><p>Máscara Adulto 19.030.0290-5 ANVISA 10293210016 / 10293210017</p></div>	<div><p>Máscara Infantil 19.030.0280-2 ANVISA 10293210016 / 10293210017</p></div>	<div><p>Bocal para Inalação oral 19.030.0170-6 ANVISA 10293210016 / 10293210017</p></div>
--	---	--

<div><p>Micronebulizador (Copinho) 19.030.0160-3 (desenho do copinho desmontado) Reg ANVISA 10293210016 / 10293210017 O inserto deve estar totalmente assentado no fundo da base do copinho.</p></div>	<div><p>Mangueira (extensão) 19.031.0640-1(1,60m) / 0660-0(2,80m) Conector Verde 9/16" (Oxigênio/Nebulizador ROSCA) Reg ANVISA 10293210016 19.031.0650-4(1,60m)/0670-0(2,80m) Conector Amarelo 3/4" (Ar Comprimido Hospitalar) Reg ANVISA 10293210017 19.031.0630-9 Reg ANVISA 10293210004</p></div>
---	--