



COLETOR DE DRENAGEM URINÁRIA EXTERNO MASCULINO

1. NOME DO PRODUTO:

Coletor de Drenagem Urinária Externo Masculino.

2. MARCA:

Biobase.

3. FABRICANTE:

Biobase Indústria e Comércio Ltda.

Rua dos Oitis, Nº 80 – Distrito Industrial

CEP: 37.550 – 000

Pouso Alegre/MG.

Fone/Fax: (35) 3427-7000

CNPJ: 05.216.859/0001-56

4. REGISTRO:

Produto registrado na ANVISA sob nº 80212340014.

5. DESCRIÇÃO DO PRODUTO E FORMA DE APRESENTAÇÃO:

Artigo médico-hospitalar de uso único, estéril, indicado para coleta de urina em pacientes do sexo masculino, acometidos de incontinência urinária.

BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 05.216.859/0001-56 INSC. EST.: 525.185.259.0052

Rua dos Oitis, n.º 80 – Distrito Industrial – CEP: 37.550-000 – Pouso Alegre/ MG

Tel.: (35) 3427-7000



COLETOR DE DRENAGEM URINÁRIA EXTERNO MASCULINO

Confeccionado em PVC atóxico, flexível e preservativo de puro látex.

Produto esterilizado a feixe de elétrons e embalado em embalagem plástica única e individual.

Produto de tamanho único, possuindo apresentações de 1,20 m e 1,30 m (tamanho do tubo).

Embalagem de embarque, em papelão, contendo 250 unidades.

6. PRAZO DE VALIDADE:

02 (dois) anos a partir da data de esterilização.

7. PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO:

Feixe de Elétrons.

8. COMPONENTES DO PRODUTO:

- Tubo: PVC Cristal;
- Preservativo: látex;
- Conector Fêmea: PVC Azul;
- Conector Macho: PVC Azul.

9. EMBALAGEM:

O produto é apresentado em embalagem plástica única e individual.

BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 05.216.859/0001-56 INSC. EST.: 525.185.259.0052

Rua dos Oitis, n. ° 80 – Distrito Industrial – CEP: 37.550-000 – Pouso Alegre/ MG

Tel.: (35) 3427-7000



COLETOR DE DRENAGEM URINÁRIA EXTERNO MASCULINO

10. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO E CONTROLE:

- Abrir assepticamente a embalagem, após, certificar-se das características técnicas do produto;
- Observar o aspecto geral da embalagem. Caso encontrar-se danificada, não utilizar o produto;
- Observar o prazo de validade do produto. Caso encontrar-se vencido, não utilizar o produto;
- Observar a data de esterilização do produto. Caso encontrar-se vencida, não utilizar o produto;
- Em casos de embalagem danificada e/ou violada, informar imediatamente a empresa para que sejam tomadas as ações necessárias.
- A utilização deve ser realizada por pessoal qualificado, como médicos e/ou enfermeiros.

11. EFEITOS COLATERAIS:

O produto não apresenta efeitos colaterais, desde que utilizado corretamente de acordo com a finalidade de seu uso.

12. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO:

Conservar o produto em local limpo, seco e ao abrigo da luz solar e entre temperatura de 15 a 35°C.

O empilhamento máximo deve ser de 10 caixas.

BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 05.216.859/0001-56 INSC. EST.: 525.185.259.0052

Rua dos Oitis, n.º 80 – Distrito Industrial – CEP: 37.550-000 – Pouso Alegre/ MG

Tel.: (35) 3427-7000



COLETOR DE DRENAGEM URINÁRIA EXTERNO MASCULINO

13. PRECAUÇÕES:

Artigo médico-hospitalar de uso único. Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada e/ou o prazo de validade vencido.

As condições de esterilização estão asseguradas dentro do prazo de validade de 02 (dois) anos, desde que a embalagem não esteja danificada.

No transporte e manuseio, devem ser tomadas precauções para que não ocorram danos à embalagem e ao produto.

Produto estéril de uso único, destruir após o uso e proibido reprocessar.


14. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC):

Informações, dúvidas, críticas e/ou sugestões; entrar em contato com o SAC Biobase:

Fone/Fax: (35) 3427-7029

E-mail: qualidade2@biobase.ind.br

15. FOTO DO PRODUTO:

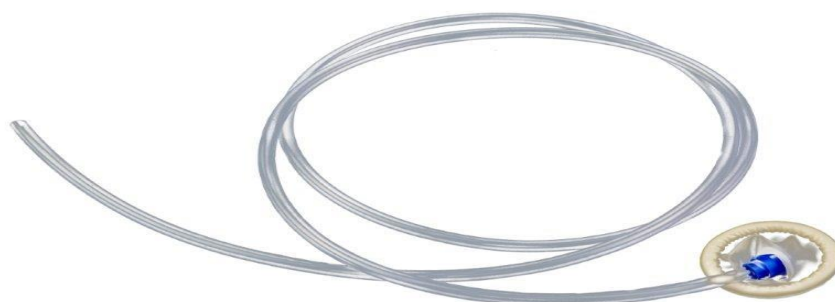

BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ : 05.216.859/0001-56

INSC. EST.: 525.185.259.0052

Rua dos Oitis, n.º 80 – Distrito Industrial – CEP: 37.550-000 – Pouso Alegre/ MG

Tel.: (35) 3427-7000